

SPACER

Spacer geçi olarak implante edilebilen bir tıbbi cihazdır. Kronik periprostetik eklem enfeksiyonlarında ilk aşamada enfekte implantın çıkarılmasını takiben lokal olarak antibiyotik salınımı yapan geçi yerini kaplayıcılar (spacer) kullanılır. Spacer'lar antibiyotik salınımı sağlayarak enfeksiyon tedavisinde yardımcı olurlar. Diz, kalça ve omuz olarak üç farklı tipi ve farklı boyları vardır.

Spacer ürünlerini üretmekteyiz vaka anında kullanıma hazır hale getiriyoruz.

Üretilerek kullanıma hazır hale getirilen spacer'ların vaka anında elle hazırlanan spacer'lara göre en önemli avantajları aşağıdaki gibidir.

Mekanik mukavemetleri daha fazladır.

Antibiyotik salınımları standart ve yeterli ölçüdedir.

Dizaynları açısından daha fazla harekete izin verir.

Uygulanmaları cerrahi süreyi uzatmaz.

Ayrıca farmakolojik olarak, her antibiyotiğin çimentoya eklenmeside uygun değildir.

Vaka sırasında hazırlanan spacer'lar, mekanik olarak daha zayıf ve kırılmaya yatkındır. Y

üzeyler birbirine daha uyumsuz olup, sıklıkla harekete daha az izin verir.

Her ne kadar spacer'lar için birincil kaygı antibiyotiğin elüzyonu olsa da, yüksek miktarda antibiyotiğin eklenmesinin, çimentonun dayanıklılığını azaltıp, kırılma riskini arttıracığı göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak 4,5 gr'dan fazla antibiyotik eklenmesi, çimentoyu belirgin olarak zayıflatmaktadır.


Bu nedenle vaka anında hazırlanan spacerlar sağlıklı olmayabilir.

SPACER(ARALAYICI)




SPACER ÇEŞİTLERİ


KALÇA SPACER

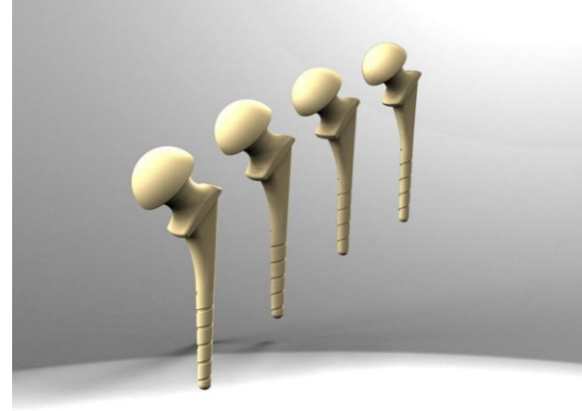


KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (MM)
OGMHS48/G	OGM Kalça Spacer	48 MM Short
OGMHS52/G	OGM Kalça Spacer	52 MM Short
OGMHS56/G	OGM Kalça Spacer	56 MM Short
OGMHS60/G	OGM Kalça Spacer	60 MM Short
OGMHS48L/G	OGM Kalça Spacer	48 MM Long
OGMHS52L/G	OGM Kalça Spacer	52 MM Long
OGMHS56L/G	OGM Kalça Spacer	56 MM Long
OGMHS60L/G	OGM Kalça Spacer	60 MM Long

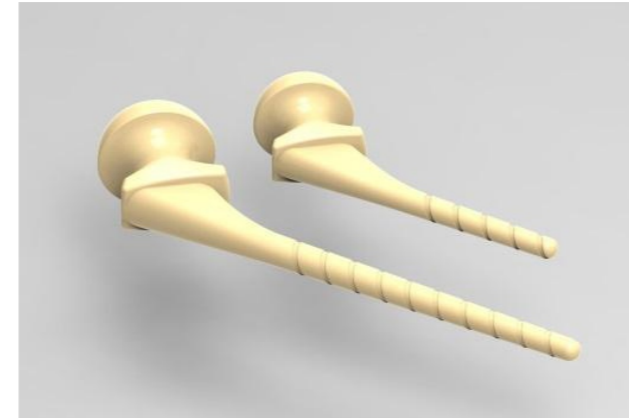


KISA	A	B	C	D
48SG	48	55	125	10
52SG	52	60	115	10,40
56SG	56	65	133	10,8
60SG	60	70	125	11,00
UZUN	A	B	C	D
48LG	48	55	210	10
52LG	52	60	206	10,40
56LG	56	65	202	10,8
60LG	60	70	200	11,00

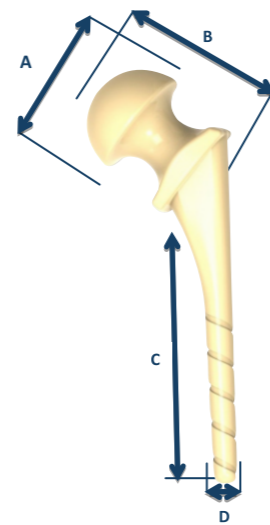

DİZ SPACER

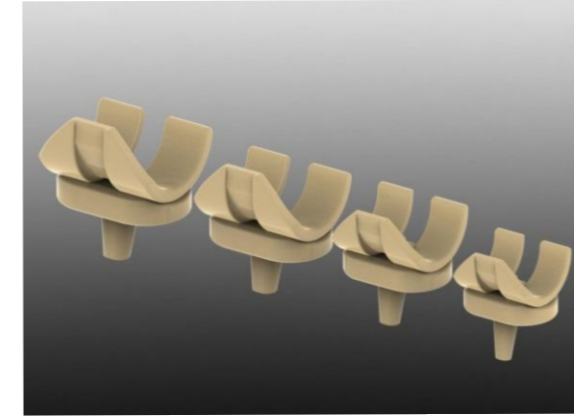


KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (MM)
OGMKS56/G	OGM Diz Spacer	56 MM
OGMKS66/G	OGM Diz Spacer	66 MM
OGMKS76/G	OGM Diz Spacer	76 MM
OGMKS86/G	OGM Diz Spacer	86 MM

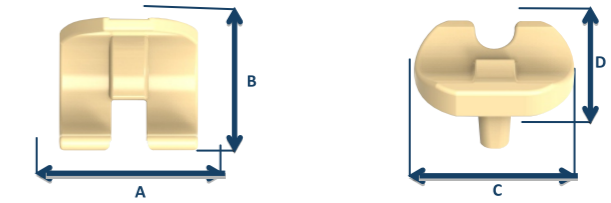

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Küçük	56	42	62	43
Orta	66	48	72	47.5
Büyük	76	54	82	52
Çok Büyük	86	62	92	56.5



OMUZ SPACER

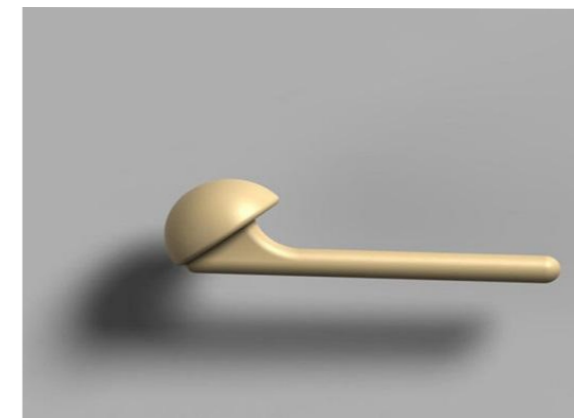

KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (MM)
OGMSS42/G	OGM Omuz Spacer	42 MM